

GUIDE UTILISATION POTS SAMIX



1. Présentation du pot




Premier bouchon (utilisation avec bouton poussoir)

Second bouchon (utilisation comme pot pommade)

Bouton poussoir

Vue de dessous

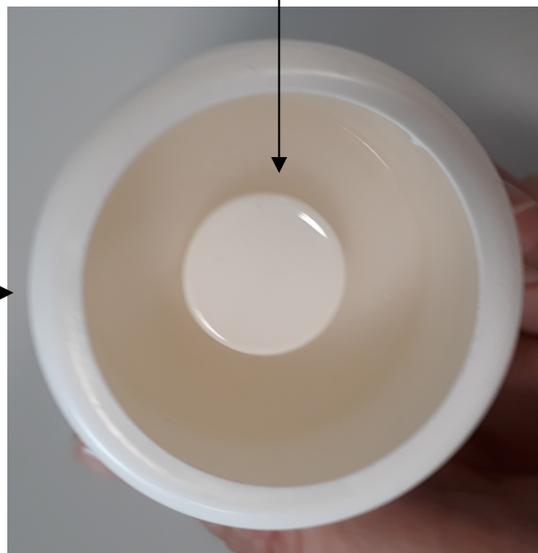

2. Utilisation comme un pot pommade « classique »

Il suffit d'ouvrir le second bouchon (solidaire avec le premier bouchon) et de prélever directement la pommade du pot.




3. Utilisation avec le bouton poussoir

- Ouvrir le premier bouchon



- Pousser doucement le bouton poussoir situé en dessous du pot pour faire sortir la pommade au fur et à mesure (sans contact direct avec le reste de la pommade)

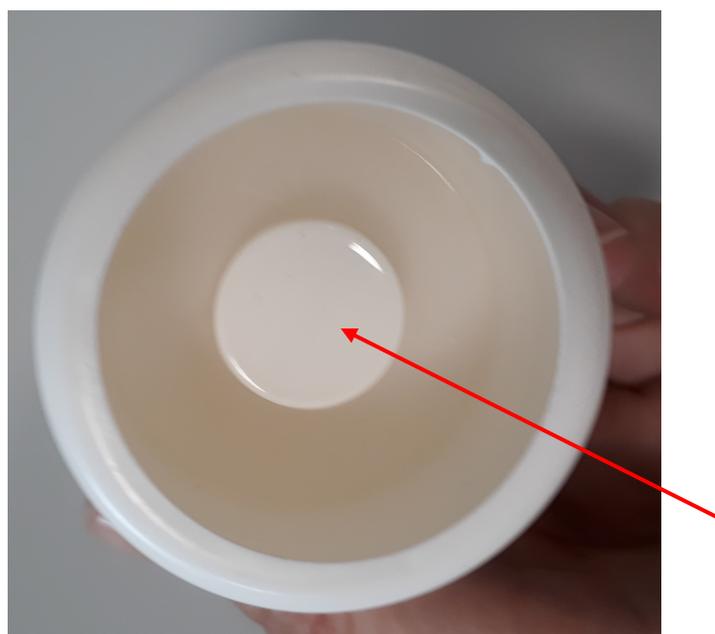


4. Utilisation de l'embout doseur (1dose=0.5mL)

- Ouvrir le premier bouchon du pot et débarrasser l'embout doseur (2 parties)



Embout doseur

- Monter l'embout doseur en « clipsant » la partie rouge dans les 2 orifices de l'autre partie (au niveau de l'écriture SEAL sur le plastique transparent)

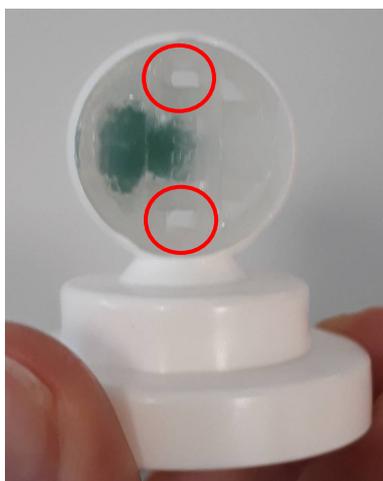


Attention, il faut bien entendre un « clic » pour que l'embout soit fixé correctement


- Visser le tout sur le pot (à la place du premier bouchon) et tourner l'embout rouge pour le placer à l'horizontal



- Appuyer sur le bouton poussoir de manière à faire entrer la pommade dans l'embout. A ce moment la **bille verte se retrouve en haut** et la dose de pommade en dessous

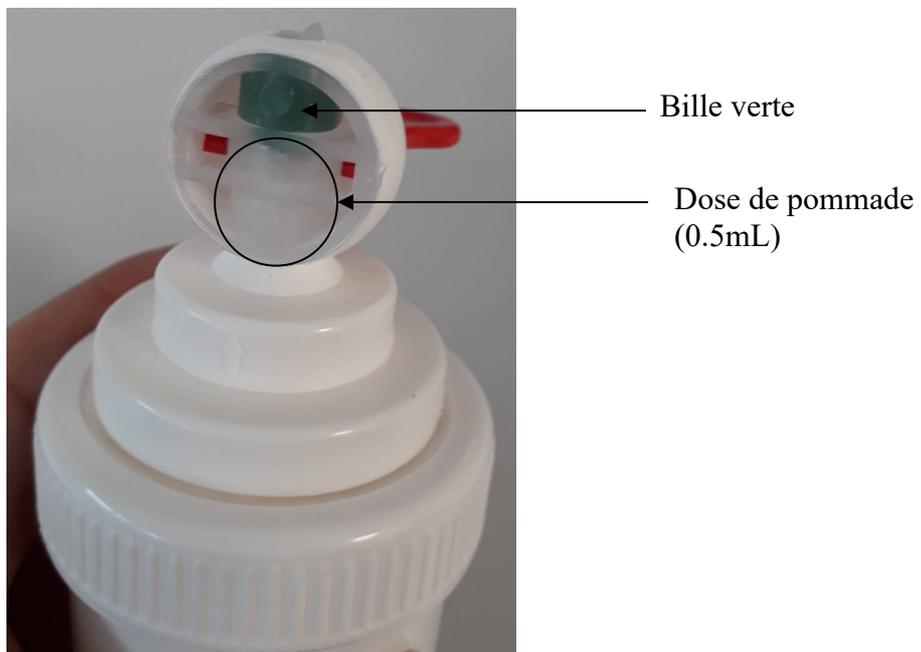

- Tourner l'embout rouge pour que la **bille verte se retrouve en bas** puis pousser le bouton poussoir pour faire sortie la dose de pommade (la bille verte se retrouve alors au dessus avec la dose suivante en dessous)

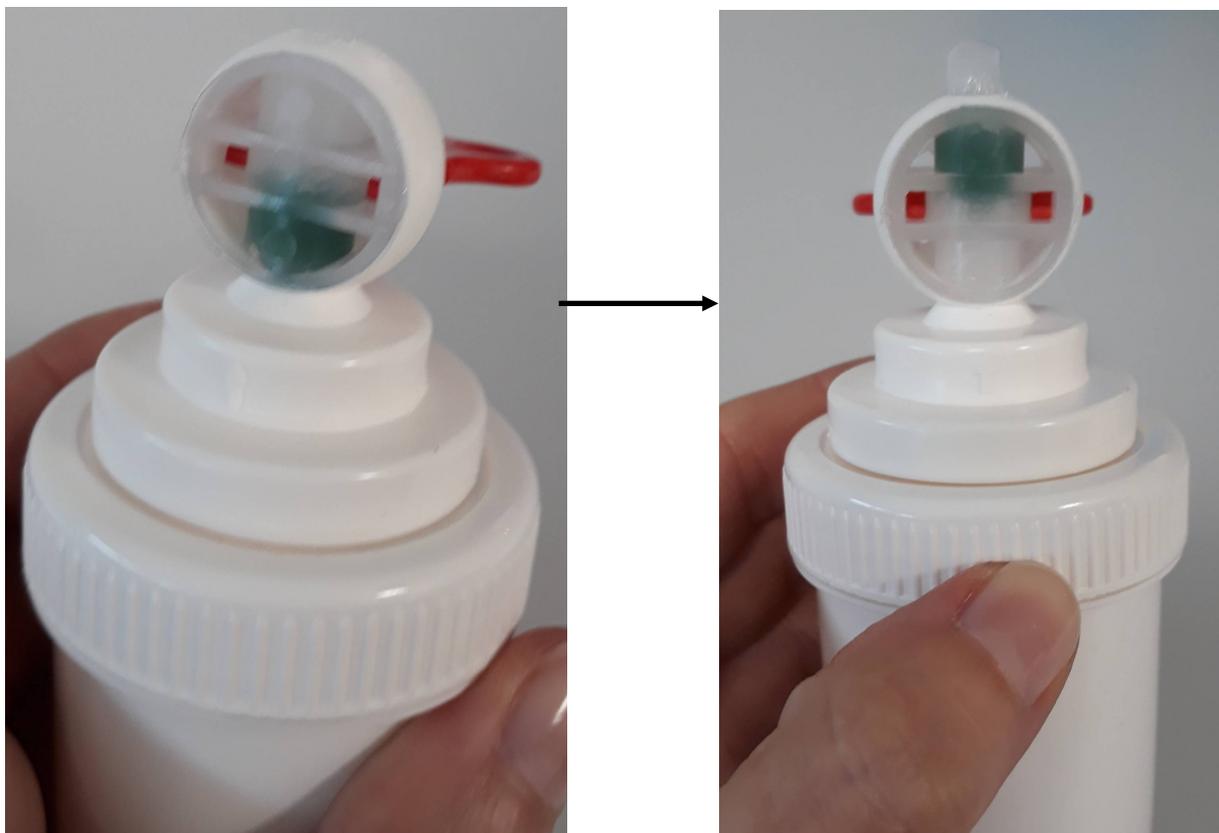

Pour les prochaines utilisations, il suffira de tourner l'embout rouge, pour faire descendre la bille verte et appuyer sur le bouton poussoir pour délivrer la dose de pommade suivante.